

Verwenden der Übertragungssoftware

Für Geräte zu verwenden


Prüfständer BSA

Härteprüfer HPE III




Übertragen und speichern Sie alle evtl. noch auf dem Gerät gespeicherten Messwerte – nach der Übertragung eines neuen Softwarestandes sind diese nicht mehr vorhanden (gelöscht) und können nicht mehr wiederhergestellt werden.


- 1.) Verbinden Sie das Gerät mit dem PC - verwenden Sie ausschließlich die Original USB-Datenleitung.
- 2.) Starten Sie Die Software chip45boot2 Gui.exe.
- 3.) Führen Sie alle Einstellungen - mit Ausnahme des Dateipfades – wie auf dem Bild zu sehen ist aus.

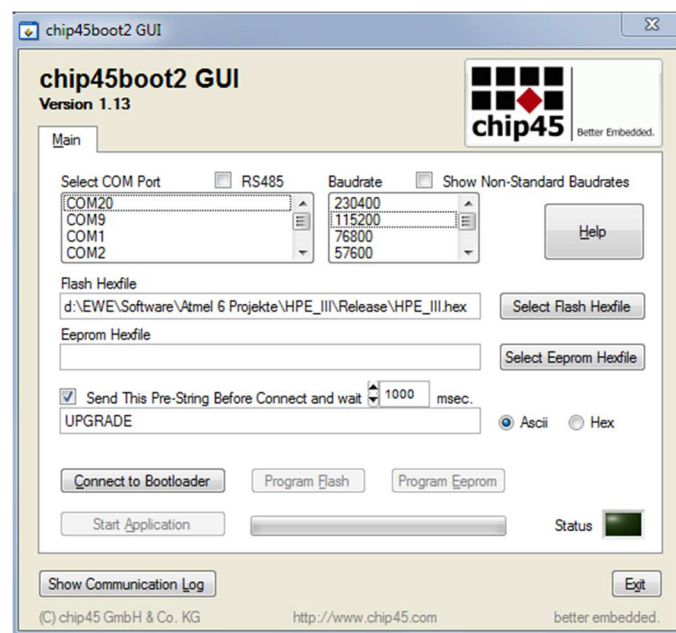

- 4.) Wählen Sie die mit dem Gerät verbundene COM-Schnittstelle aus
- 5.) Stellen Sie die Baudrate auf 115200 ein.
- 6.) Betätigen Sie den Button „Select Flash File“ und wählen Sie die Datei für das Update (.hex) aus.
- 7.) Aktivieren Sie das Häkchen bei „Send This Pre String Bevor Connect and wait“.
- 8.) Stellen Sie 1000 msec. bei „Send This Pre String Bevor Connect and wait“ ein.
- 9.) Geben Sie den Text UPGRADE ein (Groß und Kleinschreibung beachten).
- 10.) Betätigen Sie den Button „Connect to Bootloader“.
- 11.) Warten Sie, bis die „Status“ - LED grün leuchtet.
- 12.) Das HPE III schaltet sich ein und zeigt an, dass es sich im „Upgrade - Mode“ befindet.
- 13.) Betätigen Sie den Button „Program Flash“ - die Status - LED wird gelb

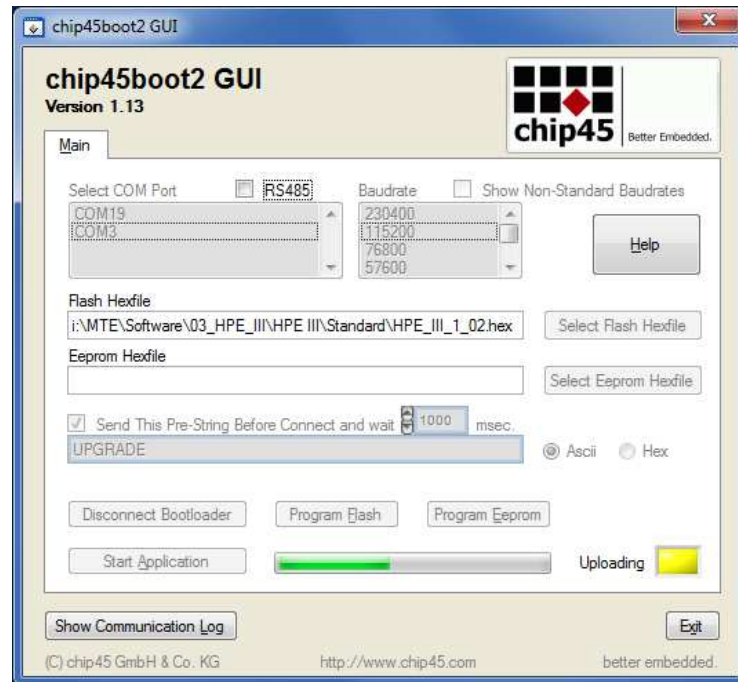

14.) Warten Sie, bis der Fortschrittsbalken unter dem Button abgeschlossen und die Status - LED grün ist.

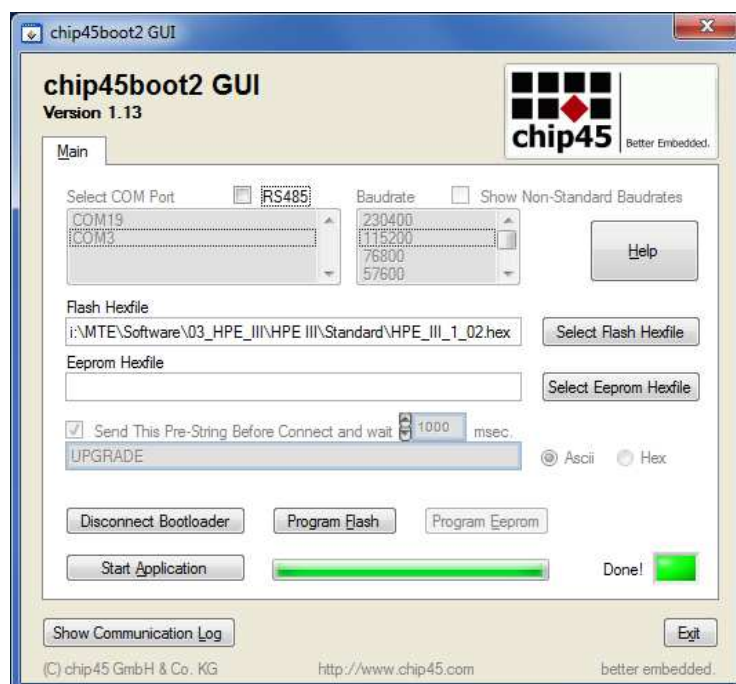

15.) Betätigen Sie den Button „Start Application“

16.) Das Gerät ist nun erfolgreich aktualisiert und bestätigt dies durch einen Summertone und einem Neustart.

17.) Betätigen Sie den Button „Exit“ und schließen Sie das Programm.

18.) Sollte der Ablauf so nicht möglich sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf bzw. schicken Sie das Gerät mit einer Fehlerbeschreibung ein.

Ihr Ansprechpartner bei Firma Bareiss: Herr Zolota, Tel. +49 7305/964259